

CORDLESS STIRRER


(MAGNETIC STIRRER)

 **NAKAZAWA**



コードレススターラー

- ★ コンパクトサイズなので、持運び便利
- ★ 電源のない場所や野外でも使用可能
- ★ NK-SC02 最大約 18 時間(使用状況による)
- ★ NK-SC03 最大約 40 時間(使用状況による)
- ★ NK-SC05 最大約 20 時間(使用状況による)

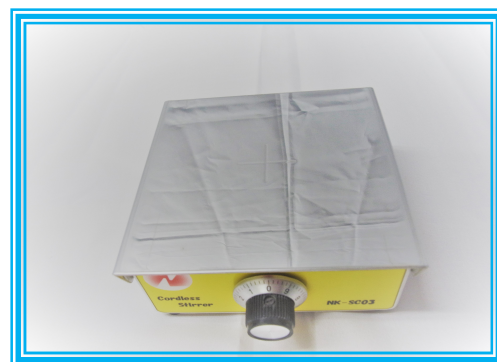

= 有限会社 中澤製作所 =

= NK-SC02 / 03 / 05 =

天板は、ステンレス板（SUS304）を使用しています。（NK-SC02、NK-SC03 のみ）
天板中央に『 + 』マークが付いていますので、ビーカーをのせる場所が容易に分かります。
フル回転使用時で NK-SC02 は約 18 時間、NK-SC03 は約 40 時間、NK-SC05 は約 15 時間使用可能です。



電源 ON 時は、赤ランプが点灯します。



充電中、充電完了が一目でわかります。

充電中：赤点灯



充電完了：緑点灯



	NK-SC02	NK-SC03	NK-SC05
回転数	0～1500rpm(フル充電時)	0～2000rpm(フル充電時)	0～2500rpm(フル充電時)
マグネット	ネオジム 約 2500G × 2	ネオジム 約 4000G × 2	ネオジム 約 2000G × 2
攪拌容量	100ml～1000ml	10ml～300ml	10ml～100ml
モーター	DC モーター		
外形寸法	W125×D125×H55 mm (突起部を除く)	W90×D90×H45 mm (突起部を除く)	W65×D90×H40 mm (突起部を除く)
電源	バッテリー 専用充電器(AC100～240V)		
充電時間	約 9 時間	約 6 時間	約 3 時間
定価	24,800 円	19,800 円	14,800 円

代 理 店

有限会社 中澤製作所

本社 千葉県船橋市三山 3 丁目 29-18
工場 千葉県船橋市車方町 1141-2
TEL 047 (457) 9191
FAX 047 (457) 9192
URL <http://www.nakazawa-ss.jp>

* このカタログに記載されている商品についての詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。
* この他特注製品も承ります、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
* 製品改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。